



MEDICAL

20
21

PROTEZIONE OCCHI
MASTER CATALOGUE

 UNIVET

your eyes
our passion



UNIVET
una storia da raccontare



A large, stylized graphic of the number '20' in white, set against a black background. The '2' is formed by a thick white line that curves at the top and bottom, while the '0' is a solid white circle. The text 'Oltre 20 anni di esperienza nella protezione occhi' is positioned within the negative space of the '2'.

Oltre 20 anni
di esperienza nella
protezione occhi







> TEST LAB




Tecnologia e Innovazione

Conformità Internazionale di sicurezza

Il Test Center Univet è un laboratorio altamente innovativo con tecnici specializzati e macchinari sofisticati. Il laboratorio sviluppa dispositivi e materiali, tecnologie e trattamenti che sono il DNA dei prodotti di sicurezza Univet e sono da sempre sinonimo di design, performance e massima protezione.

Ogni prodotto di sicurezza Univet è sottoposto a tutti i test di resistenza richiesti dalla norma EN 166.


Questi test di stress e di qualità ottica molto impegnativi permettono ad ogni dispositivo di ottenere la certificazione di sicurezza, garantendo una protezione superiore rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato.

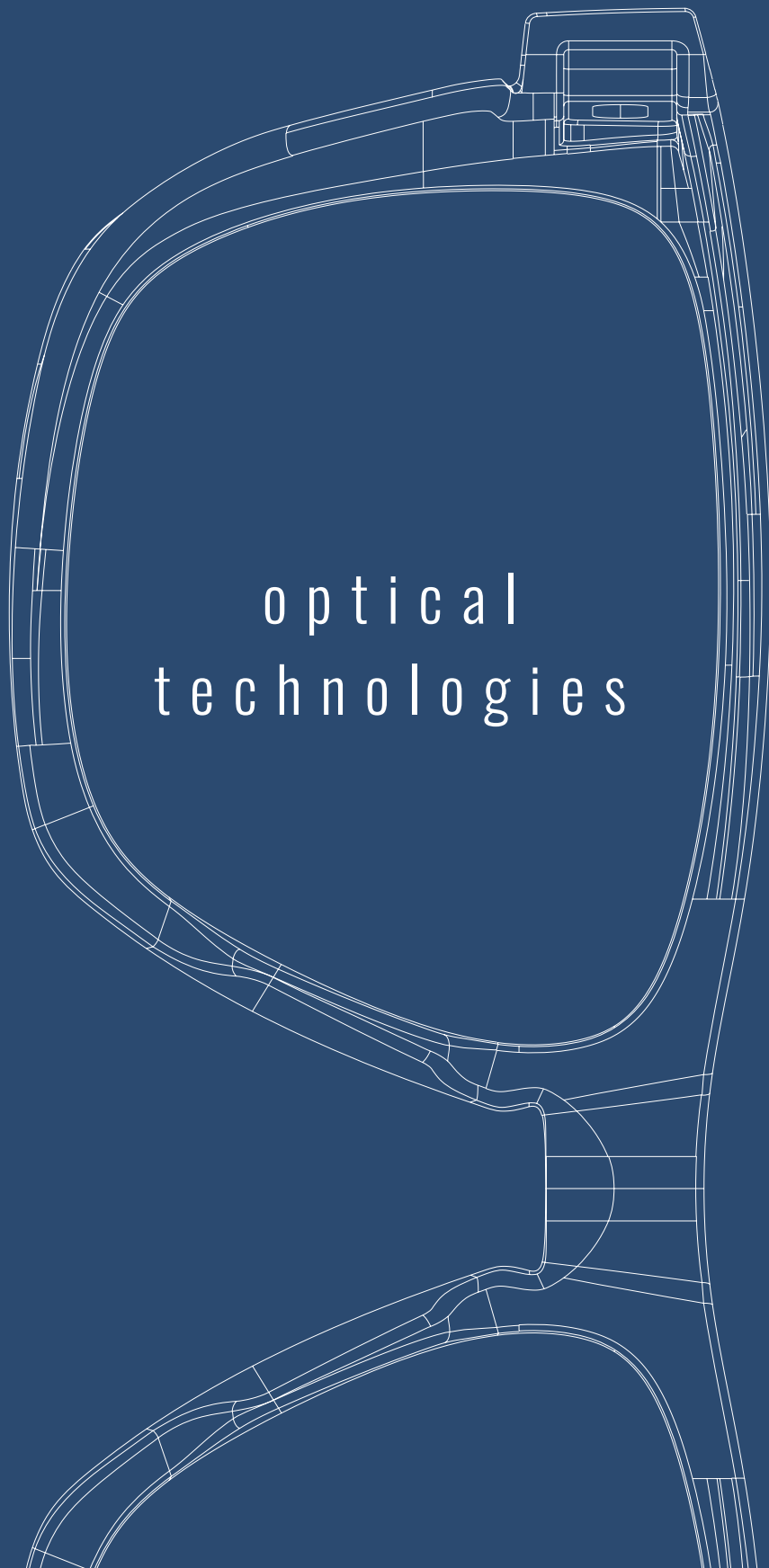

optical
technologies


Vanguard

Trattamento Ultra
Performante

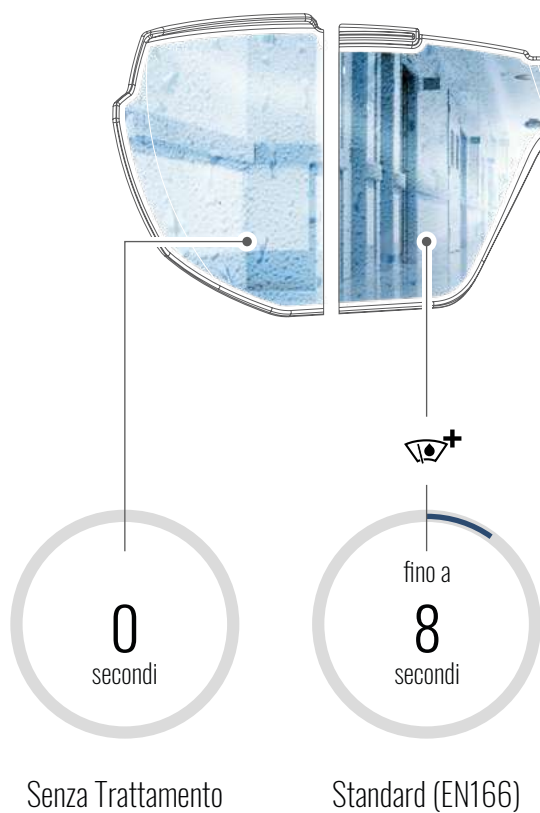

In caso di uso combinato con la mascherina chirurgica, o in ambienti caratterizzati dalla presenza di vapore, le lenti dell'occhiale di protezione potrebbero appannarsi, mettendo la persona in una condizione di scarsa visibilità e di potenziale pericolo.

Trattamenti a confronto
Anti appannamento

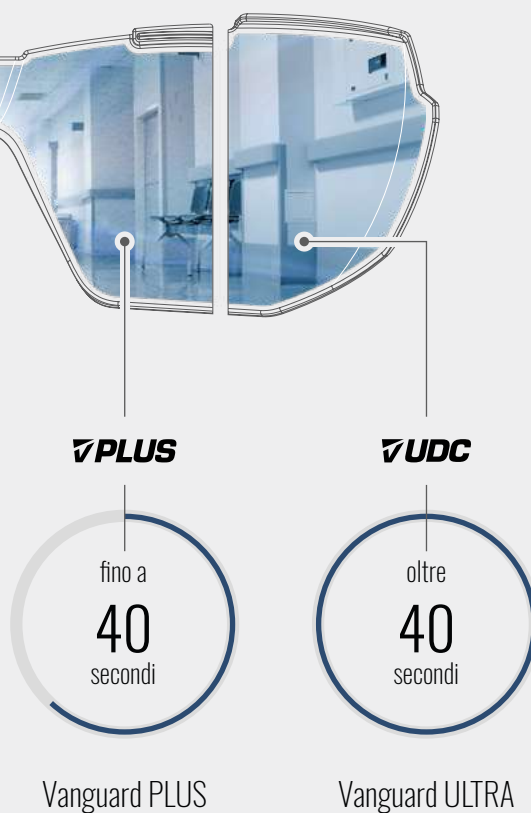

Il reparto R&D di Univet ha sviluppato due trattamenti ultra performanti Vanguard, che migliorano la proprietà anti appannante della lente, consentendone un utilizzo anche in condizioni estreme e garantendo la massima protezione.



Progettato
per condizioni
estreme

Legenda trattamenti lente

SIMBOLOGIA	TRATTAMENTO	MARCATURA
	Vanguard ULTRA	KN
	Vanguard PLUS	KN
	Anti-Fog	N
	Anti-Fog Basic	-

PLUS

Vanguard PLUS è il trattamento, anti graffio e anti appannamento, applicato su entrambi i lati delle lenti, con certificazione K e N. Il trattamento garantisce proprietà anti appannanti 5 volte superiori alle norme e una resistenza all'abrasione maggiore del doppio di quanto previsto dalla norma EN 166.

UDC


Vanguard ULTRA (UDC - Ultra Double Coating) è un doppio trattamento distinto e specifico, anti graffio esterno e anti appannamento interno, con performance eccezionali e certificazione K e N. Il trattamento è la soluzione ideale negli ambienti più ostili: garantisce infatti proprietà antiappannanti straordinarie e una resistenza all'abrasione impareggiabile.

Le performance del trattamento possono variare in base al contesto, al tipo di DPI, alla conformazione del viso e alla sudorazione nonchè ad una corretta pulizia e manutenzione delle lenti. (Indicazioni a pag. 204)

Soft Pad

Tecnologia del comfort


La tecnologia SoftPad, attraverso le molteplici regolazioni dell'asta e l'innovativo utilizzo dei materiali, perfeziona l'ergonomia dell'occhiale, per un comfort impareggiabile.

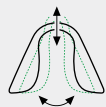

Nasello regolabile



Terminale in gomma

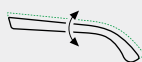

Movimento a bascula

Aderenza perfetta


Massima stabilità

Il sistema brevettato SoftPad è studiato per fornire completa adattabilità al viso dell'utilizzatore. Presenta un terminale rivestito in gomma con movimento basculante che gli consente di appoggiarsi alle tempie con perfetta aderenza e tenuta. Il ponte nasale adattabile adegua l'altezza dell'occhiale, per consentire la visione attraverso la sezione centrale della lente dove è assicurata la massima qualità ottica.



Soft Pad

Tecnologia del comfort

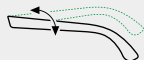

Regolazione inclinazione



Regolazione lunghezza

Adattabilità

Fitting e comfort prolungato

Le aste regolabili, in inclinazione e lunghezza, in tre posizioni, permettono di ottenere il perfetto fitting. Ogni utilizzatore è in grado di trovare la corretta configurazione del dispositivo e lavorare in costante sicurezza. La vestibilità ed il comfort visivo sono pertanto garantiti per lunghi periodi, evitando l'affaticamento oculare.



Tecnologia disponibile sui modelli:

5X1 pag. 121 - **5X6** pag. 141 - **5X7** pag. 95 - **6X1** pag. 75






UNIVET SERVICE PLUS

Univet Service Plus è il servizio di assistenza Univet per le aziende. Grazie all'analisi delle necessità del cliente e alle misurazioni dei parametri fisiognomici di ogni volto, una squadra di professionisti individuerà la soluzione adatta alla realizzazione del prodotto personalizzato.



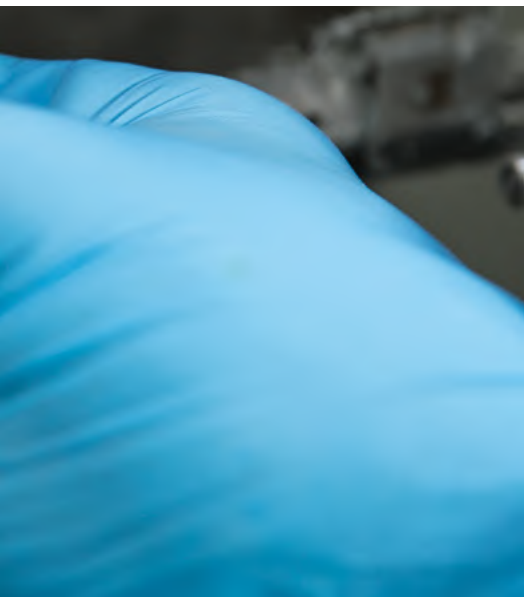

Scarica
il catalogo



[univetsafety.com/
catalogo-correttivi](https://univetsafety.com/catalogo-correttivi)

OCCHIALI CORRETTIVI

Gli occhiali correttivi Univet sono riconosciuti come Dispositivi medici e DPI di II categoria certificati secondo la normativa EN166. Le lenti sono realizzate su misura partendo dalle specifiche di ogni utilizzatore, con la prestigiosa manifattura "Made in Italy" di Univet.



 **UNIVET**
OPTICAL TECHNOLOGIES

visiere

/ VISIERE PREMIUM



710



PRESTAZIONI ELEVATE

La visiera Univet modello 710 permette una protezione completa del viso. Lo schermo anti appannante presenta marcatura N e marcatura 3 per una protezione contro gocce e spruzzi.



COMFORT PROLUNGATO

Comodo e funzionale, è dotato di morbida spugna latex-free in appoggio alla fronte.

Scopri
di più



[univetsafety.com/
710](https://univetsafety.com/710)

TECNOLOGIE MONTATURA



710



> FEATURES



Trattamenti Lente



- > Visore in acetato con proprietà anti appannante, resistente a ripetuti lavaggi
- > Fascia elastica regolabile
- > Morbida spugna latex-free in appoggio alla fronte
- > Visore inclinabile fino a 90° e removibile per sostituzione
- > Adatta per l'utilizzo combinato con occhiali da vista e mascherine protettive
- > Marcatura 3 per protezione da gocce e spruzzi di liquidi



710

710

MODELLI



ACCESSORI

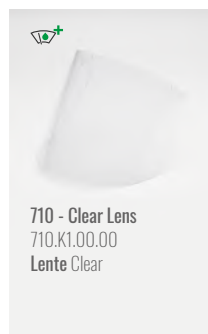
 80 g
MDU7003

La confezione contiene 1 montatura e 1 visore in acetato con proprietà anti appannante.

/ VISIERE PREMIUM



701.02



COMFORT PROLUNGATO

È dotata di una banda elastica che permette una facile regolazione sulla nuca, nella parte frontale è caratterizzata da una morbida spugna.



PRESTAZIONI ELEVATE

Il visore 701.02 è caratterizzato da uno schermo con copertura estesa nella parte superiore della fronte, che conferisce al prodotto marcatura 3 per una protezione contro gocce e spruzzi.



Scopri
di più



[univetsafety.com/
701.02](https://univetsafety.com/701.02)

TECNOLOGIE MONTATURA





> FEATURES



- > Visore in acetato con proprietà anti appannante, resistente a ripetuti lavaggi
- > Fascia elastica regolabile
- > Visore inclinabile fino a 90°
- > Visore removibile per sostituzione
- > Adatta per l'utilizzo combinato con occhiali da vista e mascherine protettive
- > Marcatura 3 per protezione da gocce e spruzzi di liquidi

Trattamenti Lente



701.02

701.02

MODELLI



701.02 - Clear Acetate
MDU7002
Frame Grigio/Bianco
Lente Clear
Campi d'impiego 3

ACCESSORI



701.02 - Clear Acetate Lens
122.00.10
Lente Clear

 74 gunivetsafety.com/701.02

/ VISIERE PREMIUM





701.00



PROTEZIONE E COMFORT

La visiera 701.00 è dotata di una morbida spugna latex-free in appoggio alla fronte.



REGOLAZIONE INCLINAZIONE

Lo schermo in acetato termoformato,
inclinabile fino ad un angolo di 90°,
ed è facilmente sostituibile.

Scopri
di più



[univetsafety.com/
701.00](https://univetsafety.com/701.00)

TECNOLOGIE MONTATURA

701.00

univetsafety.com/701.00



701.0



> FEATURES



- > Visore in acetato con proprietà anti appannante, resistente a ripetuti lavaggi
- > Morbida spugna latex-free in appoggio alla fronte
- > Fascia elastica regolabile
- > Visore inclinabile fino a 90°
- > Visore removibile per sostituzione
- > Adatta per l'utilizzo combinato con occhiali da vista e mascherine protettive

Trattamenti Lente




701.00

MODELLI



ACCESSORI



 68 g

701.00

univetsafety.com/701.00



VUNIVET

Evaluated on the basis of
2013/425 (EU) Regulation



Fabbricante / Manufacturer: VUNIVET S.p.A.
via G. Prati, 87 - 25085 Pozzano (BS) Italia

Questo visore è progettato per proteggere gli occhi e il viso da impatti. Non esporre questo articolo a calore, fiamme o scintille. Utilizzato separatamente può non garantire una protezione completa contro le fonti pericolose che raggiungono gli occhi e il viso.



703.01

> FEATURES



- > Visore con trattamento anti appannante basico
- > Morbida spugna latex-free in appoggio alla fronte
- > Visore monouso
- > Adatta per l'utilizzo combinato con occhiali da vista e mascherine protettive

703.01

MODELLI



703.01 - Clear
703.01.00.00
Lente Clear



36 g


Il codice 703.01.00.00 si riferisce alla singola visiera, ordinabile a multipli di 20 pezzi.

/ VISIERE PREMIUM





712^{UP}

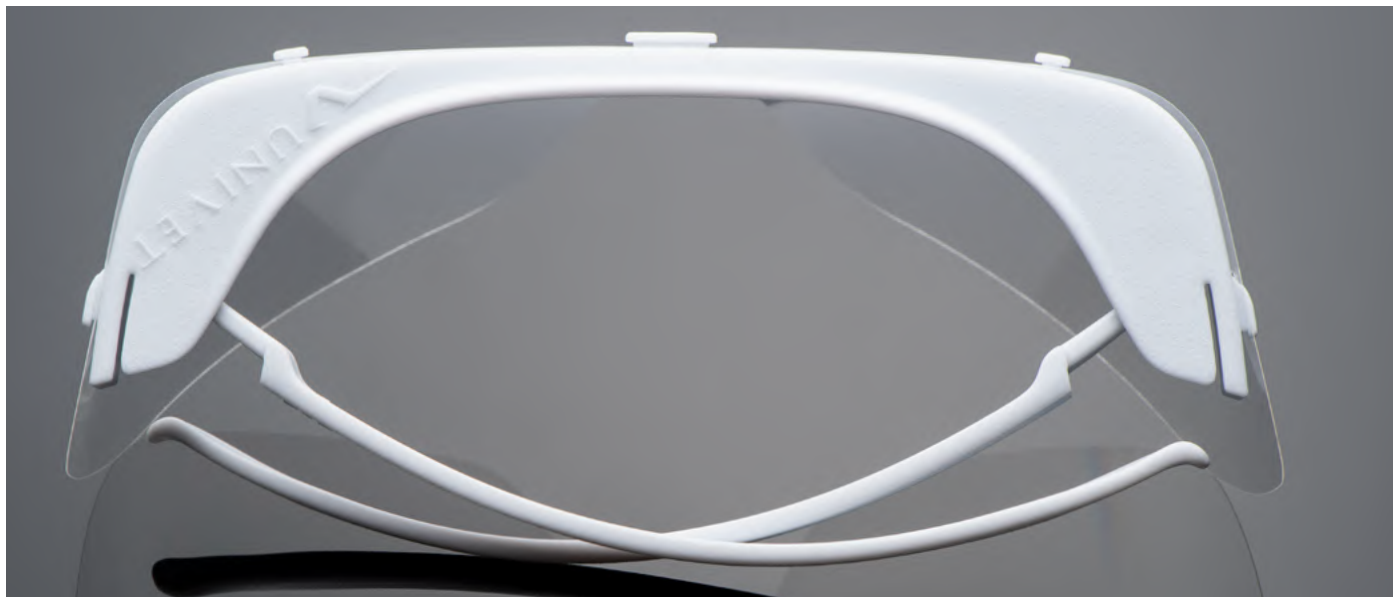



PROTEZIONE OCCHI TASCABILE

Frame superleggeri con aste richiudibili che permettono al prodotto, una volta rimosso l'ampio visore monouso anti appannante, di essere riposto nel taschino.



Scopri
di più



[univetsafety.com/
712up](https://univetsafety.com/712up)

TECNOLOGIE MONTATURA



7 1 2 U P



> FEATURES



- > Tascabile con aste pieghevoli
- > Lente con trattamento anti appannante basico
- > Lente monouso
- > Lente removibile per sostituzione
- > Ultra leggero
- > 5 montature colorate

712^{UP}

MODELLI




712 UP - Frames + Lenses Kit
MDU7010
Frame Verde vespa; Blu scuro;
Grigio chiaro; Viola;
Verde Univet
Lente Clear


ACCESSORI



712 UP - Spare Lenses
712.K1.00.00
Lente Clear

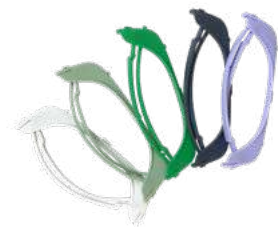

Frame colorati inclusi nel codice
MDU7010

 12 g
**MDU7010**

La confezione contiene 10 kit per un totale di 50 visori e 10 montature.

Ogni kit è composto da 5 visori monouso intercambiabili e 1 montatura colorata.

712.K1.00.00


La confezione contiene 200 visori intercambiabili.

/ VISIERE PREMIUM



712

> FEATURES

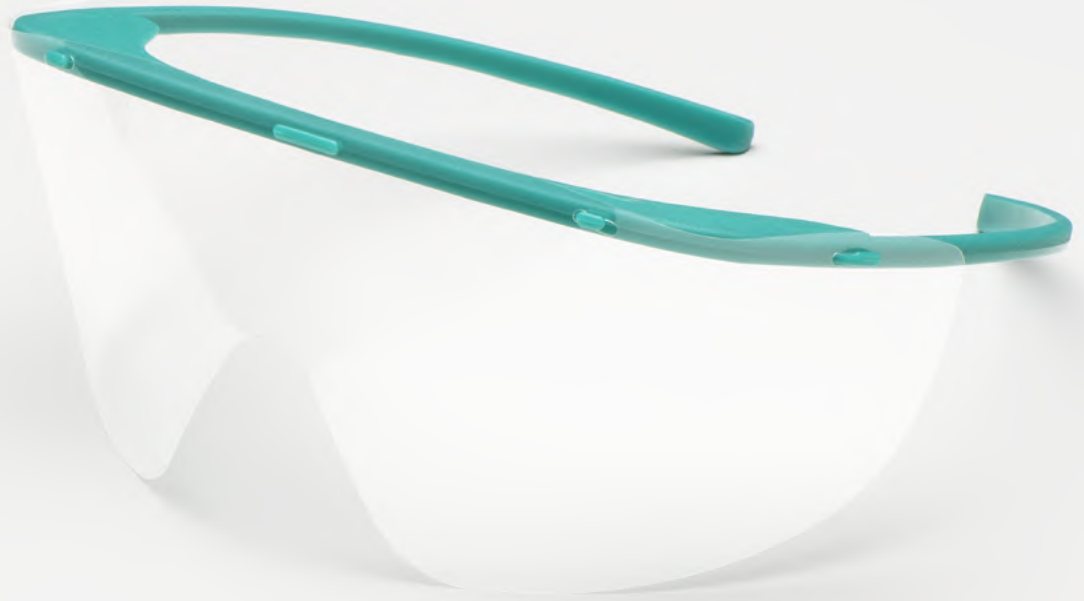

- > Lente con trattamento anti appannante basico
- > Lente monouso
- > Lente removibile per sostituzione
- > Ultra leggero
- > 5 montature colorate

712

712

MODELLI

ACCESSORI


 10 g


MDU7009

La confezione contiene 20 visori monouso intercambiabili e 5 montature colorate.

712.K1.00.00

La confezione contiene 200 visori intercambiabili.

712.K2.00.00

La confezione contiene 20 montature colorate.

/ VISIERE PREMIUM





7 1 1

> FEATURES



- > Visore con trattamento anti appannante basico
- > Visore monouso
- > Visore removibile per sostituzione
- > Ultra leggero
- > Adatta per l'utilizzo combinato con occhiali da vista e mascherine protettive


711

711

MODELLI



ACCESSORI


 19 g

